


Sipariş Bilgisi

Parça Numarası	Tanım	Maske Rengi
100332	SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık	Bej
100336	SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi	Bej
100274	SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık	Mavi
100289	SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi	Mavi
100277	SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık	Pembe
100291	SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi	Pembe
100281	SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık	Kamufraj
100293	SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi	Kamufraj
100285	SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık	Leopar
100295	SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi	Leopar
100239	SleepWeaver Advance YALNIZCA Başlık	Siyah

SleepWeaver İle Verilen Parçalar

SleepWeaver Maske ve Bağlantı Pimi

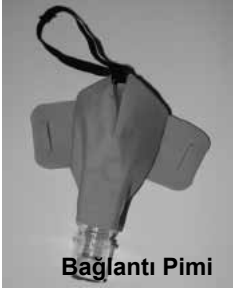

Bağlantı Pimi

Tek Parçalı Başlık



SleepWeaver® ADVANCE Türkçe

Kumaş Burun Cpap Maskesi ve Başlık

LATEX İÇERMEZ



Maskenizin Tanıtımı

SleepWeaver Advance Maskeniz, sol tarafta gösterildiği gibi başlığa takılarak kullanılır. Başlığın üç bağlantı noktası vardır—ikisi maskenin sağ ve sol taraflarında ve CPAP ya da benzer makinelere bağlanmasını sağlar.

Kullanım Amacı

SleepWeaver evlerde veya Uyku Laboratuvarlarında, hem tek hem de birden fazla hastada tekrar kullanılabilen sürekli havayolu basıncı veya aynı amaçlı bir başka tedavi için tercih edilen bir cihazdır. SleepWeaver, CPAP ve Bi-Level sistemlerinde 4 cm H2O basıncından 20 cm H2O basıncına kadar test edilmiştir. Görsel bilgi için adresindeki www.circadiance.com/help 'Eğitim Videosunu' izleyebilirsiniz.

Maskenin Kullanıma Hazırlanması

1. SleepWeaver Advance Maskenizi ambalajından çıkarınız.
2. CPAP veya bilevel makinenizin hortumunu maskenin ön tarafında bulunan Bağlantı Pimine takınız.
3. CPAP ya da bilevel cihazınızı gereken basınç seviyesinde çalıştırınız.
4. Maske şişmeye başladığında, başlığı iki elinizle tutunuz, maskeyi burnunuzun üzerine yerleştiriniz ve başlığı kafanızın üzerinden arkaya doğru geçiriniz. Maskenin kavisli tarafının tam burnunuzun üzerinde olduğundan emin olunuz ve Başlığı kafanızın tam ortasına hizalayınız.
5. Başlığı, Ense Kayışı kulaklarınızın hemen altına oturana kadar başınızın arkasına doğru çekiniz.
6. Herhangi bir sızıntı olması durumunda 'Sızıntıların Giderilmesi' bölümüne bakınız.
7. Normal uyku pozisyonunuzu alınız. Herhangi bir sızıntı olursa, maske konumunu yeniden ayarlayınız.
8. Maskenin kullanıma nasıl hazırlanacağını görüntülü olarak öğrenmek isterseniz, lütfen aşağıdaki web adresimizi ziyaret ediniz: www.circadiance.com/help

Sızıntıların Giderilmesi - Herhangi bir sızıntı olması durumunda bu talimatları uygulayınız:

1. CPAP veya bilevel cihazınız açık ve gerekli basınca sahip durumdayken, maskeyi burnunuz üzerine gelen kısmından tutun ve hafifçe yüzünüzden çekin, ayak uçlarınıza doğru aşağı yönlendirin ve yerine hafifçe bırakın.
2. Maskenin kenarından herhangi bir sızıntı olması durumunda ise, Ense Kayışını başlıktan çıkarınız, maskeyi sıkılaştırmak için kayışları dışa doğru çekiniz ve kayışı yeniden başlığa geçiriniz.
3. Gözünüze herhangi bir sızıntı gelmesi durumunda, Başlığı düzeltiniz.
4. Sızıntı olması ve daha rahat bir kullanım ihtiyacı doğması durumunda bazen maskeyi hafifçe gevşetip 1. Adımda anlatılan talimatları yerine getirebilirsiniz.
5. Başlık kayışlarının çok sıkı veya çok gevşek olması durumunda da sızıntılar meydana gelebilir. Ürünü birkaç kere kullandıktan sonra kendiniz için en uygun kullanım şeklini bulacaksınız.



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Tel: +31 (0)70 345 8570



Amerikan yapımı
malzemelerle
Meksika'da
birleştirilmiştir.



1060 Corporate Lane • Export, PA 15632
Telefon: 888 • 825 • 9640 ya da +1 724 • 858 • 2837
cservice@circadiance.com
www.sleepweaver.com

Maskenin Çıkarılması

1. SleepWeaver'i çıkarmak için maskeyi burnunuzdan kaldırın ve başlık kısmını çıkarın.
2. Başlık parçasının kayışlarını gevşetmenize gerek yoktur. Birkaç kere pratik yaptıktan sonra kendinize en uygun ayarı bularak maskeyi kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz.

Evde Temizleme Talimatları - Kişisel Kullanım

- Maske, aşındırıcı olmayan bir sabun kullanılarak elde temizlenebilir.
- SleepWeaver'ı normal bir deterjan kullanarak çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. (yıkamadan önce deterjan talimatlarını gözden geçiriniz) Maskeyi soğuk ya da ılık suda yıkayınız, asla sıcak su kullanmayınız.
- Maskeyi sererek kurutunuz. (yaklaşık kuruma süresi, ortamın nem derecesine bağlı olarak 6 ila 12 saat arasında değişir)
- SleepWeaver maskeyi, kurutma makinesinde kurutmayınız.
- Bağlantı pimini bağlayan tıbbi bant belirli bir süre kullandıktan sonra yapışkan özelliğini kaybedeceğinden yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
- Bağlantı pimi maskeye, lateks içermeyen beyaz tıbbi bant ile tutturulur. Bağlantı pimini yerinden çıkarıp 1/3 oranında sirkeli suda (1 fincan suya, 1/3 oranında sirke katarak) ayrı bir şekilde temizleyebilirsiniz.
- Bağlantı pimini sirkeli suda beklettikten sonra iyice durulayarak kurumaya bırakınız.
- Kuruduktan sonra bağlantı pimini lateks içermeyen tıbbi bant ile yerine tutturunuz. (daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız)

Çoklu Kullanımda Temizlik Talimatları - Uyku Laboratuvarları

- Maskeyi bir diğer hastanın kullanımına hazırlamak için Control III[®] gibi yüksek seviyeli bir kimyasal dezenfektan kullanılmalıdır. (dezenfekte işlemi, dezenfektanın kullanım talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır)
- Dezenfekte işleminin ardından maskenin normal bir deterjan kullanılarak çamaşır makinesinde yıkanması gerekir. (yıkamadan önce deterjan talimatlarını gözden geçiriniz) Maskeyi soğuk ya da ılık suda yıkayınız, asla sıcak su kullanmayınız. SleepWeaver maskeyi sererek kurutunuz, kurutma makinesinde kurutmayınız. (yaklaşık kuruma süresi, ortamın nem derecesine bağlı olarak 6 ila 12 saat arasında değişir)
- Diğer bir hastaya geçmeden bağlantı pimini çıkararak temizleyiniz ve yerine takınız. (daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız)



- Maskenin %2 glütaraldehit solüsyonu ve ısıyla sterilizasyon sıcak su pastörizasyonu, otoklav ya da etilen oksit gaz sterilizasyon yöntemleriyle sterilize edilmemesi gerekir. Çamaşır suyu veya trikloretilen içeren maddeleri kullanmayınız.

Bağlantı Piminin Çıkarılması - Kronik bir hastalığınız yoksa, doktorunuz tarafından bu şekilde talimat verilmediyse ya da maske Uyku Laboratuvarında kullanılmıyorsa, maskenin her yıkandığında bağlantı piminin çıkarılmasına ve bandın yenilenmesine gerek yoktur.

1. Bağlantı pimini maskeye tutturmaya yarayan beyaz tıbbi bandı ortaya çıkarmak için maskeyi ters yüz edin ve eski bandı çıkarın.
2. Temizlemek için bağlantı pimini hortum deliğinden dışarı doğru itirin ve maskeden ayırın.
3. Maskeyi yukarıda anlatılan talimatlar doğrultusunda temizleyiniz.
4. Bağlantı pimini 1/3 oranında sirkeli suda ayrı bir şekilde temizleyiniz. Sirkeli sudan çıkardıktan sonra iyice durulayınız ve kurumaya bırakınız.

Bağlantı Piminin yerine takılması - Lateks içermeyen, su geçirmez özellikte beyaz tıbbi bant kullanın

1. Bağlantı pimi ve maske tamamen kuruduktan sonra maskeyi ters yüz ediniz.
2. Bağlantı pimini, "erkek" (sırt) tarafı kumaşın dışına yaklaşık 1 cm dışarı çıkacak şekilde maskenin içine yerleştiriniz.
3. Lateks içermeyen tıbbi banttı yaklaşık 25 cm'lik bir parça kesiniz.
4. Bir elinizle bağlantı pimini maskenin içinde tutarken bandı erkek bağlantı parçasının üzerine sarmaya başlayınız. Bandın hem kumaştan hem de bağlantı piminden yaklaşık 1 cm yukarıda olmasını sağlayınız.
5. Bandı bağlantı pimi ve maskenin etrafına en az 3 defa dolayınız.
6. Banttı arta kalan miktarı kesebilir ve meydana gelen kırışıklıkları parmaklarınızla düzeltebilirsiniz.

Bu talimatları aynı zamanda web sitemizde de bulabilirsiniz:

www.circadiance.com/help



Tıbbi Bilgi

SleepWeaver lateks ve lateks kullanılarak üretilmiş hiçbir malzeme içermez. Maskenin ya da başlığın herhangi bir parçasına HERHANGİ bir reaksiyon gösterirseniz, ürünü kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

Hava Çıkış Vanası

Hava cihazdan buharlaşma yöntemiyle çıkmamaktadır. Hava çıkışı bir dizi küçük delik sayesinde olmaktadır. Bağlantı pimi ve diğer kaynaklarla birlikte hava çıkış vanasından çıkan hava akımının özellikleri tabloda gösterildiği gibidir.

Basınç(cmH20)	4	5	10	15	20
Akış (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0



Uyarılar & Önlemler

- Federal kanunlar gereğince bu ürün ABD'de yalnızca hekimlerin isteği üzerine veya hekimler tarafından satılır.
- Sistem yalnızca CPAP veya bilevel sistemleriyle beraber ve hekiminiz ya da solunum terapistinizin tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır.
- CPAP veya bilevel sistemleri açılmadan ve düzgün çalışmadan, maske kullanılmamalıdır.
- Hava delikleri hiçbir zaman kapatılmamalıdır.
- Ürünü kullanırken lütfen sigara içmeyiniz.
- Maske %2 glütaraldehit solüsyonu, ısı sterilizasyonu, sıcak su pastörizasyonu, otoklav veya etilen oksit gaz sterilizasyon yöntemleriyle dezenfekte EDİLMEMELİDİR. Çamaşır suyu veya trikloretilen içeren çözücüler kullanmayınız.

Sınırlı Garanti

Circadiance SleepWeaver yumuşak kumaşlı CPAP burun maskesinin, beraberinde verilen parçalarla birlikte - maske, bağlantı pimi ve başlık (bağlantı pimi bandı dahil değildir) - malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olduğunu ilk müşteri tarafından satın alındıktan sonra doksan (90) günlük bir süre içinde garanti eder.